



В РАМКАХ
ПРОГРАМИ МЕДИЧНИХ
ГАРАНТІЙ НА 2023 РІК

www.ml.com.ua

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ЗГІДНО ВИМОГ НСЗУ

ДЛЯ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕМОВЛЯТ, ЯКІ НАРОДИЛИСЬ
ПЕРЕДЧАСНО ТА/АБО ХВОРИМИ, УПРОДОВЖ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ

ПМГ 2023





ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

для медичної реабілітації немовлят, які народились
передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя

АСИСТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ

(комуникативні дошки, книги, інші пристрої):

Коляски для осіб з особливими потребами РЕЙСЕР розмір

Коляски для осіб з особливими потребами РЕЙСЕР ЕВО

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАЛИ РЕАБІЛІТАЦІЇ:

**МАТИ ГІМНАСТИЧНІ, НАСТІННІ ДЗЕРКАЛА, ПІДВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ
(ГОЙДАЛКИ, ГАМАКИ), ФІТБОЛИ/М'ЯЧІ РІЗНИХ РОЗМІРІВ ТА ФОРМ, ЗАСОБИ
ДЛЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ РІЗНИХ РОЗМІРІВ ТА ФОРМ:**

Набір гімнастичних м'ячів

(в комплекті М'яч Овербол (діам.25 см), М'яч гімнастичний Боді Болл 85 (діам. 85см; колір: червоний), М'яч гімнастичний Фізіо 95 (діам.95см; колір синій) та М'яч гімнастичний Фізіо 120 (діам.120см; колір червоний)

Набір аксесуарів для Бобат-терапії

(в комплекті: Валик 30х10, Валик 60х20, Напіввалик 60х15х10, Напіввалик 40х25х5, Кубик 40х40х40 та Клин 60х60х12)

Дзеркало корегуюче – одинарне (1,40м X 0,60м) Л-01

Дзеркало корегуюче з бічними дзеркалами (0,35-0,70-0,35) x 1,60м.
Л-02

Дзеркало корегуюче з бічними дзеркалами (0,70-0,70-0,70) x 1,60м.
Л-03

ВЕРТИКАЛІЗАТОРИ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ДО ТРЬОХ РОКІВ

Пристрій реабілітаційний СМАРТ розмір 0а

Пристрій реабілітаційний АКТИВАЛ розмір 1

Пристрій реабілітаційний ЗЕБРА ІНВЕНТО розмір 1

Пристрій реабілітаційний КОТИК І

Пристрій реабілітаційний КОТИК ІІ ІНВЕНТО розмір 1

Пристрій реабілітаційний ДАЛМАТИН ІНВЕНТО розмір 1

Вертикалізатор ІзіСтенд Бантам Екстра Смол

Вертикалізатор ІзіСтенд Цінг МПС розмір 1

СТІЛ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ШИРОКИЙ

Реабілітаційний стіл широкий з ручним регулюванням висоти СР-3-Б (з колесами)

Реабілітаційний стіл для терапії широкий з електричним регулюванням висоти СР-3Е-Б (з колесами)

**СТАНДАРТИЗОВАНІ ТЕСТИ ТА НЕСТАНДАРТИЗОВАНІ НАБОРИ ДЛЯ
ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА/АБО РІВНЯ
РОЗВИТКУ ДИТИНИ:**

Програмно-технічний комплекс «Тімоко» для осіб з фізичними вадами

**ОБЛАДНАННЯ, ІГРАШКИ ТА/АБО МАТЕРІАЛИ ДЛЯ
СЕНСОРНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ ТА РОЗВИТКУ РУХОВИХ НАВИЧОК**

Набір інвентарю для відновлення сенсорних та рухових функцій верхньої кінцівки

(в комплекті: Набір м'ячиків-присосок Тера Воллі (28шт.; діам.5,5см), Майстер плюс (м'який м'яч - синій), Тренажер для зап'ястку з регулюванням опору, Ролик сенсорний (16см; колір синій), М'ячик сенсорний Рефлекс 6 (40гр.; діам.6см; колір синій), М'ячик сенсорний Рефлекс 9 (120гр.; діам.9см; колір синій), Кільце сенсорне Аку-рінг (діам.17см) шт.)

Апарат для реабілітації руки О6Е

**ІГРОВІ ТА ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
КОГНІТИВНИХ ТА ЗОРОВО-ПЕРЦЕПТИВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК
САМООБСЛУГОВУВАННЯ;**

Столик мануальний для реабілітації з навантаженням ТБ/О






Наше обладнання представлено в:

superhumans Center

**SUPERHUMANS
CENTER**

UNBROKEN

НАЦІОНАЛЬНИЙ
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN)

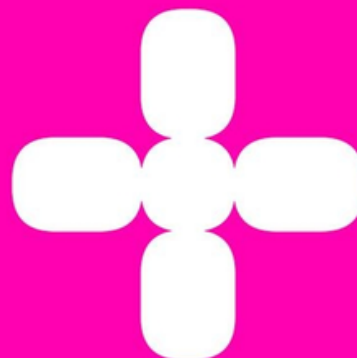

**RECOVERY
CENTER**



РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ
ЮРІЯ СЕМЕНЮКА



ПЕРШЕ МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ ЛЬВОВА



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
ОБЛАСНА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ



НАВЧАЛЬНО-
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
"ДЖЕРЕЛО"



МІЖНАРОДНА
РЕАБІЛІТАЦІЙНА КЛІНІКА
КОЗЯВКІНА



ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
"ПРОМІНЬ"


Чому саме ми?



БІЛЬШЕ 20 РОКІВ
НА РИНКУ!



МИ ПОСТАЧАЄМО
РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ
ОБЛАДНАННЯ ЯК ДЛЯ
ДОРΟΣЛИХ,
ТАК І ДЛЯ ДІТЕЙ

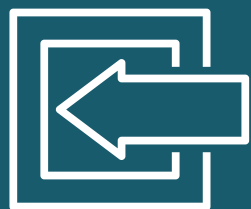

НАША КОМПАНІЯ Є
ПРЯМИМ ТА
ЕКСКЛЮЗИВНИМ
ІМПОРТЕРОМ!



МИ ПРАЦЮЄМО ЯК З
ЮРИДИЧНИМИ,
ТАК І ФІЗИЧНИМИ
ОСОБАМИ

RECK MOTomed

Tech Med

MVS
IN MOTION

EasyStand

AKCESMED
Our passion – your independence!

HASOMED

Guldmann™

meditrac

DPE
Medical Ltd. Innovation In Rehabilitation

GYMNIC
The Way to Move

SPRINTEX
NATURAL MOVEMENTS

Stepless
by Guldmann

Ми є офіційним
представництвом
в Україні
таких торгових
марок

Ми безкоштовно доставимо Вам
обладнання в будь-яку точку України



З НАМИ СПІВПРАЦЮЮТЬ



РЕАБІЛІТАЦІЙНІ
ЦЕНТРИ



ЛІКАРНІ



МЕДИЧНІ ЦЕНТРИ



КЛІНІКИ



ФІЗ. ОСОБИ



ПОЛІКЛІНІКИ



ГОСПІТАЛІ



САНАТОРІЇ





Короткий огляд обладнання



Коляска для осіб з особливими потребами

Спеціальна коляска **РЕЙСЕР/ РЕЙСЕР ЕВО** призначена для перевезення дітей з обмеженими можливостями опорно-рухового апарату.

✓ Міцна конструкція коляски надійно стабілізує дитину і забезпечує правильне формування осанки

✓ Широкий асортимент аксесуарів сприяє пристосуванню до індивідуальних потреб дитини



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- складна рама на колесах із заднім гальмом;
- регульована підніжка з ремнями для фіксації стоп;
- зйомний міжстегновий клин;
- регульована спинка, бічні подушки, жилет, регульований підголівник;
- передній бампер, рукоятка;
- передні поворотні колеса (тільки в моделі РЕЙСЕР ЕВО).

РЕЙСЕР / РЕЙСЕР ЕВО	РОЗМІР 1	РОЗМІР 2	РОЗМІР 3	РОЗМІР 4
Орієнтовний зріст користувача*,см	< 120	< 150	< 180	< 180
Ширина сидіння, [см]	33	36	39	45
Глибина сидіння, [см]	33	43	47	47
Висота спинки (з підголівником),см	50-62	60-72	66-84	66-84
Ширина спинки [см]	30	32	36	41
Висота спинки (без підголівника),см	62	72	84	84
Довжина стопи, [см]	20	20	22	22
Кут нахилу спинки	90°-140°	90°-135°	90°-140°	90°-140°
Кут нахилу сидіння	20°	20°	20°	20°
Кут нахилу підніжки	100°-120°	100°-125°	100°-120°	100°-120°
Максимальна вага користувача,кг	35	50	60	90




Великі колеса для
ідеальної
амортизації



Поворотний клин,
що адаптується під
клієнта



Надійний механізм, що
складається способом
"книжка"

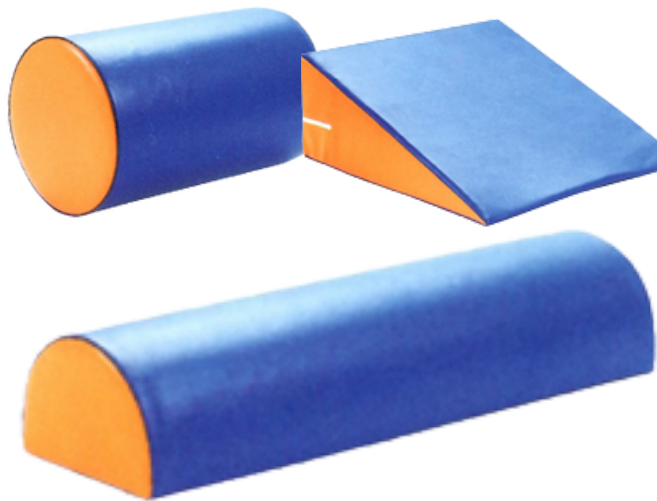

Реабілітаційні валики, напіввалики, куби та клини використовуються в фізіотерапії і масажі.

Їх застосування корисно для розтягнення структур

- **м'язових тканин**
- **зв'язок**
- **сухожиль і суглобів**

М'ячі гімнастичні Фізіо - це гумові м'ячі абсолютно круглої форми.

- ✓ **безперешкодне здійснення перекатів**
- ✓ **використання в активній гімнастиці**

“Овербол” – це гумовий м'яч для активного відпочинку, ігор, спорту, ЛФК та реабілітації. Овербол легко надути ротом, а можна компактно скласти в спущеному вигляді.



Дзеркало корегуюче – це мобільне дзеркало, що призначене для спостереження під час виконання людиною фізичних вправ.

Вертикальні та горизонтальні лінії, для відстеження правильної постави та виконання правильних рухів.



Вертикалізатори

Вертикалізатор СМАРТ призначений для статичної вертикалізації пацієнта.

Використання вертикалізатора:

- ✓ зменшує наслідки, пов'язані з постійним перебуванням пацієнта в сидячому або лежачому положенні
- ✓ позитивно стимулює до подолання наслідків травми або хвороби.

Відкидний столик регулюється по висоті та куту нахилу

Інноваційна система UPRIGHT PRO™, що складається з пояса грудей і пояса стегон з дуже великим діапазоном регулювання

Зріст пацієнта: від 50 см до 200 см, максимальна вага - 95 кг.



СМАРТ

Незалежні один від одного фіксатори колін з м'якими наколінниками регулюються по висоті і глибини;

Поворотні ролики з гальмами дають можливість легко переміщати пристрій (в тому числі з пацієнтом).

АКТИВАЛ

Динамічний вертикалізатор АКТИВАЛ допомагає пацієнту приймати положення стоячи і самостійно ходити.

Легка і стабільна рама дає можливість самостійно переміщатися, а сепаратор ступнів запобігає схрещуванню ніг.

2 IN 1

Виріб поєднує 2 функції в одному пристрої:
статичну та динамічну

Стандартна комплектація АКТИВАЛ:

- рама на колесах з гальмами;
- сепаратор або стабілізатор нижніх кінцівок;
- регульована стегнова обойма;
- регульована грудна обойма;
- обв'язка стабілізуюча таз, поручні.



СЕПАРАТОР НИЖНІХ КІНЦІВОК
(ДИНАМІЧНА ФУНКЦІЯ)



СТАБІЛІЗАТОР НИЖНІХ
КІНЦІВОК
(СТАТИЧНА ФУНКЦІЯ)

Зріст пацієнта: від 70см до 200см, максимальна вага - 95кг



Реабілітаційний пристрій
призначений для дітей з обмеженнями опорно-
рухової системи, які не навчилися сидіти або мають
значні труднощі в прийнятті сидячого положення.

ЗЕБРА ІНВЕНТО

Зріст пацієнта 70-165 см, макс. вага - 60кг

Вертикалізатор підходить для реабілітації дітей

зі зниженим
м'язовим
тонусом

з
спастичністю

при
ортопедичних
захворюваннях

після хірургічних
операцій для
зменшення
навантаження на одну
або обидві нижні
кіньовки

Завдяки застосуванню пневматичної
пружини можна плавно змінювати
кут нахилу сидіння (функція
напівлежачого положення) у
діапазоні від $(+25^{\circ})$ до (-20°) .



КОТИК І

Вертикалізатор **КОТИК І** призначений для передньої
вертикалізації дітей (положення лежачи на животі).
Пневматичний сервопривід допомагає виставити потрібний
кут нахилу пристрою, що значно полегшує контроль дитини
в пристрої.

Особливо корисний у випадку з
маленькими пацієнтами, які
важко переносять
вертикалізацію з підтримкою
ззаду.



Система бічних
опор і ременів



Пневматичний
підйомник



Забезпечує належну
стабілізацію та безпеку



Зріст пацієнта: 70-100 см, макс. вага - 25 кг

КОТИК ІІ ІНВЕНТО



Відповідна конфігурація пристрою дає можливість прийняти вертикальне положення з підтримкою ззаду або спереду.

Зміна налаштування пристрою і регулювання кута нахилу, завдяки пневматичному підйомнику, дають можливість плавно підняти дитину з позиції лежачи в положення стоячи.

Система подушок і ременів надійно фіксує тіло дитини, при цьому у дитини є можливість їсти, вчитися або грати в положенні стоячи.



ДАЛМАТИН ІНВЕНТО



Вертикалізатор **ДАЛМАТИН ІНВЕНТО** виконує функцію:

- реабілітаційного крісла
- статичного вертикалізатора
- кушетки

Зміна положення дитини у вертикалізаторі здійснюється за допомогою пневматичного підйомника

Жилет безпеки і стегновий ремінь мають інноваційні застібки типу «візьми і потягни», що дозволяють миттєво і точно пристебнути дитину в пристрої.



Зріст пацієнта: 70 - 130см, максимальна вага - 45 кг

Зріст пацієнта: 100-165см, макс. вага - 60 кг

ІЗІСТЕНД ЦІНГ

Єдиний педіатричний вертикалізатор, який дозволяє лише одним рухом перевести дитину з положення лежачи на спині в положення лежачи на животі без додаткового регулювання підставок для ніг, коліноупорів, спинки.

Зріст пацієнта - до 152 см, макс. вага - 70 кг

ПЕРЕВАГИ:

1 Одним плавним рухом можна позиціонувати дитину в будь-якому положенні: лежачи на спині, вертикально, лежачи на животі з кутом нахилу 20°

2 Великий діапазон регулювання під зріст дитини: від 112см і вагою до 32кг до 152см і вагою до 70кг

3 Можливість абдукції (відведення) кожної ноги до 30° забезпечує належне вирівнювання ніг в стегнах, колінах, стопах

4 Багатофункціональний столик можна використовувати для проведення терапії в положенні стоячи

5 Індивідуальне налаштування вертикалізатора для дітей з контрактурами

ІЗІСТЕНД БАНТАМ

Вертикалізатор ІзіСтенд Бантам призначений для дітей ясельного, молодшого дошкільного та шкільного віку з ДЦП, дистрофією м'язів та іншими розладами, що впливають на функції руху.

Зріст пацієнта: від 71 до 102 см, максимальна вага - 91кг

✓ зручність при виборі способу переміщення дитини в пристрої

✓ поступове збільшення діапазону руху в стегновому та колінному суглобах

✓ використання в інклюзивному навчанні

ЧОТИРЬОХРІВНЕВА СИСТЕМА ВЕРТИКАЛІЗАЦІЇ



ПОЛОЖЕННЯ СИДЯЧИ, ПРОМІЖНИЙ ВАРІАНТ, СТОЯЧИ І ЛЕЖАЧИ

СТІЛ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ШИРОКИЙ



З РУЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ВИСОТИ СР-3-Б



З ЕЛЕКТРИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ
ВИСОТИ СР-3Е-Б

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ СТІЛ З ШИРОКОЮ ПОВЕРХНЕЮ 120СМ СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНИЙ ДЛЯ КІНЕЗОТЕРАПІЇ ПО МЕТОДИКАМ БОБАТА, ВОЙТА, PNF.

СТОЛИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РУХОВОЇ СИСТЕМИ, ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ, ДЦП.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:



**ДВОХСЕКЦІЙНА
ПОВЕРХНЯ**
(З СЕКЦІЄЮ ДЛЯ
СПИНИ ЗРУЧНО
ВИКОРИСТОВУВАТИ
СТІЛ ДЛЯ ВПРАВ
СИДЯЧИ/ЛЕЖАЧИ)



КОЛЕСА
(ВИДВИЖНЕ ШАСІ
ДЛЯ ЛЕГКОГО
ПЕРЕМІЩЕННЯ
СТОЛУ)



**НОЖНА ПЕДАЛЬ
АБО РАМА ДЛЯ
РЕГУЛЮВАННЯ
ВИСОТИ СТОЛУ З
ЕЛЕКТРО
ПІДЙОМНИКОМ**

**МАКСИМАЛЬНА ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ: 200 КГ АБО 300 КГ.
РОЗМІР РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ Д Х Ш: 200 X 120СМ.**




Програмно-технічний комплекс «Тімоко» для осіб з фізичними вадами



ТІМОКО — це унікальний продукт, який був створений для розвитку розумових та фізичних здібностей дітей з особливими потребами (з порушеннями опорно-рухового апарату, труднощами з координації, моторики, концентрації уваги та порушенням розвитку когнітивних навичок).



Вирішуються завдання:

- ✓ Навчання концентрації уваги і збереженню зосередженості
- ✓ Підвищення швидкості реакції, поліпшення пам'яті
- ✓ Розвиток здатності розподіляти увагу, ігнорувати відволікання
- ✓ Розвиток двосторонньої координації при використанні обох рук
- ✓ Навчання контролю над рухами, тренування точності рухів
- ✓ Розвиток абстрактного мислення й тренування навичок на рівні дії-протидії.
- ✓ Зміцнення і стимулювання м'язів плечового пояса і рук.
- ✓ Тренування на збільшення діапазону рухів.
- ✓ Освоєння нових рухів і моделей взаємодії.

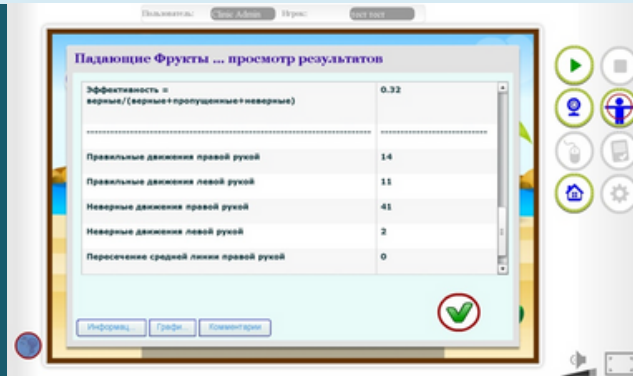


Програмно-технічний комплекс ТІМОКО призначений для роботи з дітьми в найбільш широкому віковому діапазоні. Комплекс прекрасно підходить і для розвиваючих занять з дітьми середнього дошкільного віку, і для молодших школярів. Ігри, включені в комплекс, надають широкі можливості тренування найбільш точних рухових навичок, високого рівня координації рухів.

Комплекси особливо ефективні для роботи при розладах:

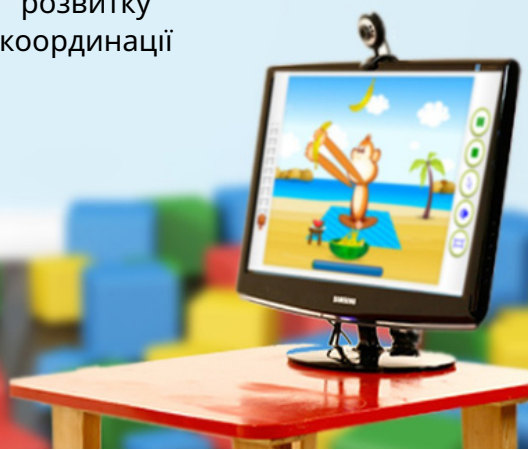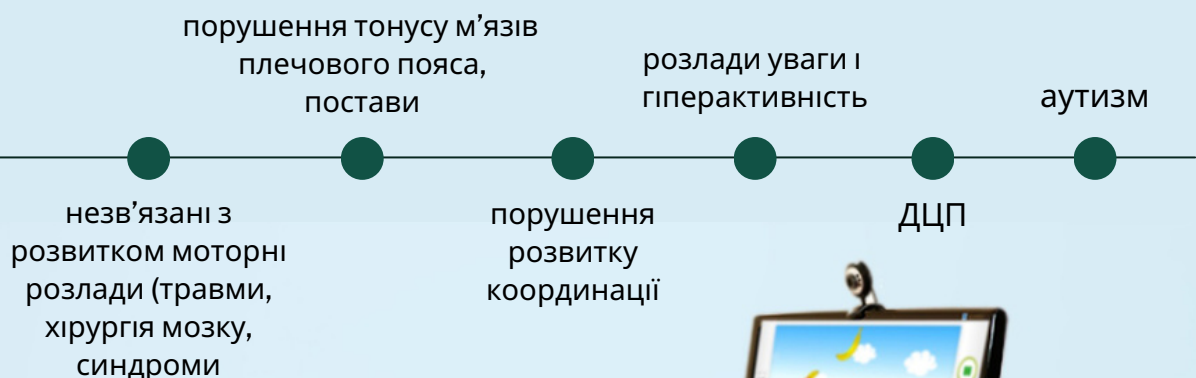

НАБІР ІНВЕНТАРЮ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СЕНСОРНИХ ТА РУХОВИХ ФУНКЦІЙ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

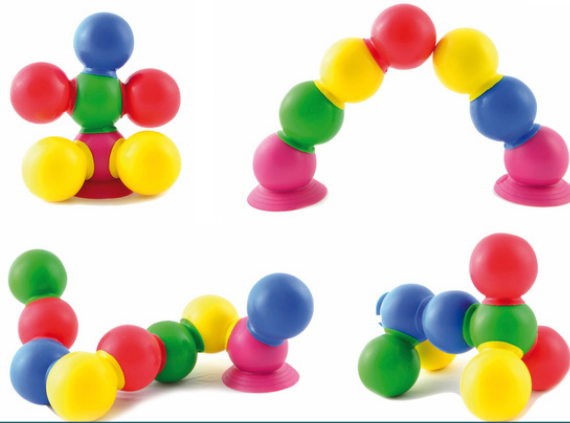

ІНВЕНТАР ДЛЯ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ ДОЗВОЛЯЄ ВИКОНУВАТИ РІЗНІ ВПРАВИ ДЛЯ ПАЛЬЦІВ, КИСТІ І ЗАП'ЯСТЯ.

Вироби мають різні ступені жорсткості:

- з слабким опором ідеальні для початкових етапів реабілітації кисті і збільшення амплітуди рухів пальців, тренування захвату і зміцнення м'язів
- з більшою жорсткістю (опором) можуть використовуватись спортсменами для тренувань і збільшення сили.

СТОЛИК МАНУАЛЬНИЙ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ З НАВАНТАЖЕННЯМ ТБ/О

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ РУХЛИВОСТІ СУГЛОБІВ, ЗБІЛЬШЕННЯ М'ЯЗОВОЇ СИЛИ РУК І ПАЛЬЦІВ, РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ ПАЛЬЦІВ

Застосовується для відновлення після інсульту, травм і переломів верхньої кінцівки в області зап'ястка і передпліччя, реабілітації наслідків ДЦП.

СТОЛИК РЕГУЛЮЄТЬСЯ ПО ВИСОТІ, Є МОЖЛИВІСТЬ ОБЕРТАННЯ НАВКОЛО СВОЄЇ ОСІ.



АПАРАТ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ РУКИ ОБЕ

ІННОВАЦІЙНЕ РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РУК



Апарат для реабілітації руки
поєднує в собі технологію
роботизованого екзоскелета і
нейробиологію, поєднує активні
та пасивні тренування,



Охоплює всі етапи реабілітації рук.

**Допомагає пацієнтам тренувати і відновлювати
рухові функції рук за допомогою серії пасивних і
активних вправ, для відновлення здатності до
повноцінної роботи рук.**

СІМ РЕЖИМІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ:

- ПАСИВНЕ ЗГИНАННЯ ТА РОЗГИНАННЯ;
- РОЗРОБКА ОДНОГО/ДЕКІЛЬКОХ ПАЛЬЦІВ;
- ТРЕНУВАННЯ З ЗАВДАННЯМИ;
- АСИСТИВНЕ ТРЕНУВАННЯ;
- ІННОВАЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ДЗЕРКАЛЬНИМ ТРЕНУВАННЯМ РУКИ;
- ТРЕНУВАННЯ В РЕЖИМІ ГРИ;
- РЕАБІЛІТАЦІЯ З НАВАНТАЖЕННЯМ.

АКТИВНЕ І ПАСИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

РЕГУЛЬОВАНА КОНСТРУКЦІЯ ФІКСАТОРА



ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

ТЕЛЕФОН

+38 (044) 339-95-85

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА

sd@ml.kiev.ua

САЙТ

<https://ml.com.ua/>

